



CHIRURGIA OTYŁOŚCI: SYSTEM MAXI

Opracowany z myślą o potrzebach chirurgii otyłości, system rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine zapewnia stabilne, nieograniczające ruchów ustawienie w miejscu operacji.

Zabiegi chirurgiczne u pacjentów z otyłością wymagają systemu o dużej stabilności, odpowiednim zasięgu działania oraz poprawnie z nim połączonych haków chirurgicznych.


System Condor® Jama brzuszna do chirurgii otyłości to zaawansowana konstrukcja, która dopasowuje się do pacjenta. System rozwieraczy pozwala na ustawienie uchwytów-ramion w dowolnej pozycji, natomiast opatentowane uchwyty do łyżek pozwalają chirurgowi skupić się wyłącznie na pracy skalpelem.

Odpowiedni rozmiar rozwieraczy umożliwia swobodę ruchów oraz bezproblemowy dostęp do operowanego miejsca.

W zależności od stopnia zaawansowania otyłości, można wykorzystać dodatkowy system Condor® Jama brzuszna. W ten sposób można uzyskać idealne rozwiązanie, które jest w stanie sprostać wymaganiom chirurgii otyłości takim jak stabilność, odpowiednia szerokość oraz wystarczająca ruchomość uchwytów-ramion.

Główne zalety Systemu Maxi do chirurgii otyłości:

- Duża stabilność
- Odpowiednia szerokość i zasięg
- Regulacja dzięki przegubom kulowym
- Odpowiednio duże haki chirurgiczne
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość skupienia się wyłącznie na pracy skalpelem dzięki opatentowanym uchwytom do łyżek
- Możliwość doposażenia w oświetlenie, niezastąpione przy operacjach w głębszych partiach ciała

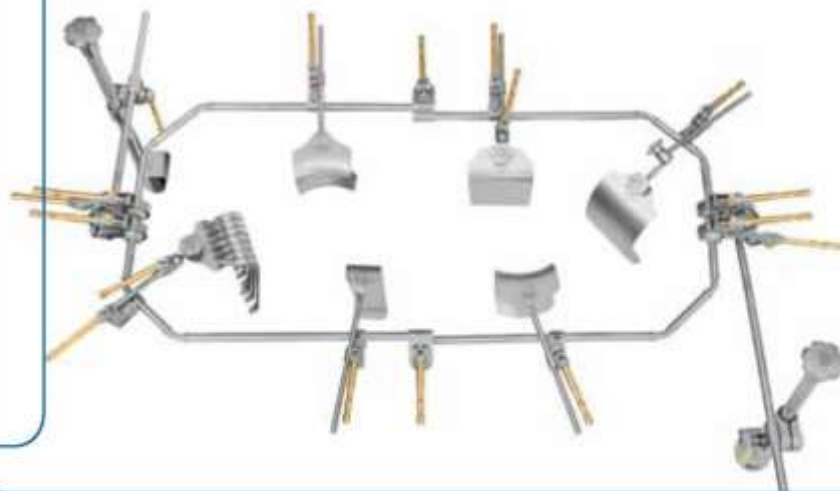

Condor® GoldLine dla chirurgii

Na sali operacyjnej precyzja odgrywa największą rolę. Dlatego też proponujemy niezastąpione wsparcie podczas zabiegów chirurgicznych w postaci systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine. Nasze produkty to kombinacja praktycznego know-how, wielu lat doświadczenia, innowacyjnej technologii oraz jakości wykonania „Made in Germany”. Wynikiem takiego połączenia jest narzędzie do chirurgii ogólnej, które dzięki swej wielofunkcyjności, jest o wiele bardziej ruchome i wydajne niż rozwiązania standardowe.

Dostępne są następujące systemy rozwieraczy chirurgicznych. Istnieje możliwość skomponowania zestawu rozwieraczy według własnych potrzeb wykorzystując elementy z poszczególnych systemów:

System Maxi

> Jama brzuszna

> **Otyłość**

System Mini

> Tarczycza

> MIVAT

> Proktologia

> Chirurgia dziecięca

System Rochard

> Transplantacja

> Chirurgia nadbrzusza

System Maxi do chirurgii otyłości oferuje wszystkie zalety systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine, takie jak unikalne przeguby kulowe umożliwiające dokładne ustawienie oraz swobodę ruchów podczas zabiegu. System modułowy ma wielofunkcyjne zastosowanie, a jego montaż jest szybki i nieskomplikowany. Opatentowane uchwyty do łyżek zapewniają idealne ustawienie przy operacji w głębszych partiach ciała, co umożliwia chirurgowi skupienie się wyłącznie na pracy skalpelem.

Cecha dodatkowa:

Uchwyt główny posiada warstwę izolacyjną, dzięki której pacjent nie jest narażony na niebezpieczeństwo poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu.

Propozycja wyposażenia: System Maxi – Chirurgia otyłości

Produkt	Opis	Ilość
100.060.060 E	Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym i warstwą izolacyjną	2
100.170.080 K	Uchwyt	2
100.440.040 K	Poprzecznicza z kulą	2
100.050.020 ES	Zacisk uniwersalny Condor® typu "SOFT" z zamkiem mimośrodowym	10
100.480.040 K	Uchwyt-ramię maxi z kulą	4
100.012.012 D	Zacisk standardowy 12 mm	2
100.025.140	Ogranicznik	2
114.080.090	Hak brzuszny Kirschner, obrotowy, 80 mm/90 mm	4
114.100.120	Hak brzuszny Kirschner, obrotowy, 100 mm/120 mm	4
115.200.008 E	Uchwyt do łyżek z przegubem kulowym	2
115.400.008 W	Uchwyt do łyżek z chwytakiem obrotowym, długość 400 mm	2
131.090.165 B	Łyżka, dopasowująca się, łyżka 90 mm/165 mm	1
115.200.008 W	Uchwyt do łyżek z chwytakiem obrotowym, długość 200 mm	2
111.100.150 B	Hak brzuszny, łyżka 100 mm/150 mm	1
111.100.200 B	Hak brzuszny, łyżka 100 mm/200 mm	1
111.100.250 B	Hak brzuszny, łyżka 100 mm/250 mm	1
116.100.220 B	Hak Deaver, łyżka 70 mm/250 mm	1
116.100.220 B	Hak Deaver, łyżka 70 mm/250 mm	1
115.050.200 B	Hak Langenbeck, 50 mm/200 mm	2

Zachęcamy do wypróbowania systemu Condor® GoldLine przy zabiegach chirurgii ogólnej. Chętnie wypożyczymy Państwu system rozwieraczy do nieodpłatnego przetestowania. Podczas pierwszego zabiegu z wykorzystaniem zestawu Condor® GoldLine otrzymają Państwo wsparcie naszego wykwalifikowanego pracownika. Z pewnością docenią Państwo zalety i łatwość obsługi naszego produktu!

KOPACZMED S.C. 80-180 Gdańsk ul. Narciarska 10 tel./fax +48 58 762 40 40 tel. kom. +48 602 714 565

biuro@kopaczmed.com / www.kopaczmed.com

BEZPOŚREDNI I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ PRODUKTÓW NIEMIECKIEJ FIRMY CONDOR GmbH

Condor® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Condor® GmbH w Niemczech i innych państwach.

Wszystkie prawa zastrzeżone, w szczególności projekt, marka oraz patenty. Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Oznaczenia tu wykorzystane mogą dotyczyć znaków towarowych, których użycie dla celów własnych przez osoby trzecie może naruszać prawa właściciela.

Condor® GmbH

Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Niemcy
Tel: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-16
Email: info@condor-med.de | www.condor-med.com